



Cute/Soft Skin
Manuale di utilizzo



Intense Pulsed Light (IPL) technology



Epilazione permanente
Ringiovanimento cutaneo
Trattamento acne

Introduzione

Grazie per aver scelto il modello CUTE/SOFT SKIN con tecnologia a luce pulsata IPL (Intense Pulse light, IPL).

CUTE/SOFT-SKIN è un dispositivo portatile, facile da usare, pensato per un comodo utilizzo a casa. Grazie alle testine interscambiabili permette di ottenere risultati efficaci nel campo dell'epilazione permanente, del ringiovanimento cutaneo e del trattamento dell'acne.

La luce pulsata (Intense Pulse Light, IPL) è una tecnica efficacemente utilizzata nel settore estetico che sfrutta l'interazione dell'energia luminosa con i tessuti per colpire, mediante effetto termico, un determinato bersaglio (cromoforo) quale il follicolo pilifero o il vaso capillare.

La tecnologia a luce pulsata assicura trattamenti estetici di alta qualità in modo rapido ed efficace senza la necessità di recarsi presso istituti di bellezza.

Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

Per maggiori informazioni si prega di contattare il distributore autorizzato I.A.C.E.R. S.r.l. al numero +39 041 5401356 o tramite email iacer@iacer.it

1. AVVERTENZE GENERALI

Seguire le avvertenze seguenti:

- Non usare in gravidanza, in allattamento, nel periodo del ciclo mestruale, o in caso di abbassamento delle difese immunitarie;
- Non usare in persone affette da patologie cardiache, ipertensione, diabete, tumori e malattie infettive della pelle;
- Non usare se si stanno assumendo farmaci che aumentano la fotosensibilità;
- Non usare se sono stati utilizzati altri metodi di epilazione nelle ultime sei settimane;
- Non usare se sono stati utilizzati prodotti per lo sbiancamento della pelle contenenti vitamina A nell'ultima settimana;
- Non usare se si stanno effettuando trattamenti con oli essenziali;
- Non usare se si stanno assumendo farmaci immunosoppressori e aspirina;
- Non usare in persone che sono state soggette a forti esposizioni solari nelle ultime due settimane;
- Non utilizzare su aree particolarmente sensibili come la mucosa e in aree delicate quali le palpebre, labbra, capezzoli e aree genitali;
- Non utilizzare in persone affette da irtutismo o in presenza di complicanze derivanti da questa patologia.

2. AVVERTENZE PER IL FUNZIONAMENTO

- Il dispositivo può essere acceso solo dopo aver inserito la testina IPL dedicata; scollegare

l'unità dalla presa della corrente prima di sostituire la testina. Durante il funzionamento prestare attenzione a non coprire i fori di aereazione al fine di non compromettere la corretta dissipazione del calore;

- Durante la stagione invernale o in caso di particolare secchezza cutanea, si consiglia di radere e idratare bene l'area da trattare il giorno prima di cominciare il trattamento;
- Indossare gli occhiali protettivi durante il trattamento. Non indirizzare il flash verso gli occhi;
- Durante il trattamento potrebbe comparire un arrossamento della cute, in tal caso si consiglia di utilizzare del ghiaccio per raffreddare la zona trattata al termine del trattamento;
- Utilizzare del cotone imbevuto d'alcol per disinfettare la testina prima del trattamento. È vietato spruzzare alcol direttamente sulla testina IPL;
- Non applicare gel o altri prodotti cosmetici sulla zona trattata per evitare di compromettere il corretto funzionamento del dispositivo;
- È consigliabile non assumere sostanze fotosensibilizzanti durante il trattamento;
- La potenza è impostabile dal livello I (basso) al livello V (alto). In condizioni in cui la tonalità di cute lo permette (fototipo chiaro), si consiglia di utilizzare potenze alte. Per pelli scure, al contrario, si consiglia di utilizzare potenze medio basse e di conseguenza i risultati potrebbero richiedere più tempo;
- Idratare bene la zona terminato il trattamento a luce pulsata. Si consiglia di aspettare un paio d'ore prima di effettuare il bagno (evitare in ogni caso acqua molto calda, è preferibile utilizzare acqua tiepida);
- Evitare l'esposizione a raggi ultravioletti durante il periodo di trattamento;

- Evitare l'esposizione al sole nei giorni successivi; se la pelle viene esposta al sole utilizzare una crema solare;
- Evitare di utilizzare l'apparecchio in un ambiente in cui sono presenti altre apparecchiature elettroniche che potrebbero interferire con il corretto funzionamento del dispositivo;
- L'annerimento della testina è un fenomeno normale e non influisce sul corretto funzionamento del dispositivo;
- Non immergere il dispositivo in acqua e non utilizzarlo in ambienti nei quali potrebbe venire a contatto con l'acqua; se vi penetra dell'acqua si consiglia di spedire il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato. Prima di effettuare qualsiasi operazione spegnere il dispositivo e scollegare la presa di rete;
- Evitare di tenere il dispositivo in luoghi con temperature alte o in presenza di campi magnetici rilevanti;
- Maneggiare il dispositivo con cautela;
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli riportati nel presente manuale d'uso;
- Può accedere alle parti interne dell'apparecchio esclusivamente il personale tecnico autorizzato dall'azienda costruttrice. Per riparazioni ed ulteriori informazioni è necessario contattare IACER Srl oppure i suoi centri di servizio autorizzati.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 KIT

- Epilatore laser IPL (Intense Pulsed Light)

- 1 testina IPL per epilazione (modello SOFT SKIN e CUTE SKIN)
- 1 testina IPL per trattamento acne (solo per il modello CUTE SKIN)
- 1 testina IPL per ringiovanimento cute (solo per il modello CUTE SKIN)
- Occhiali protettivi
- Alimentatore
- Manuale d'uso
- Astuccio di velluto protettivo

OPTIONAL

- Skin tone sensor
- Testina IPL per epilazione
- Testina IPL per trattamento acne
- Testina IPL per ringiovanimento cute

3.2 SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza massima 35 W
- Alimentazione: 100-240 V
- Frequenza di rete 50 Hz / 60 Hz
- Temperatura ambiente di immagazzinamento 0° C – 45° C
- Temperatura ambiente durante il funzionamento 5° C – 35° C

3.3 CORPO MACCHINA



3.4 ISTRUZIONI PER L'USO

1. Scegliere la testina da utilizzare e collegarla al dispositivo (figura 2): HR (epilazione permanente); SR (ringiovanimento cutaneo); AC (trattamento acne).



- Utilizzare un panno morbido imbevuto d'alcol per pulire e disinfettare la testina (solo il vetrino esterno) e gli occhiali protettivi.
- Collegare la presa dell'alimentatore al connettore circolare posto sulla parte inferiore del dispositivo. Dopo aver collegato la spina dell'alimentatore alla presa di corrente (110-240 V 50/60 Hz) il led di accensione/potenza comincerà a lampeggiare in rosso. Premere il tasto centrale per almeno 2 secondi per avviare e/o spegnere il dispositivo.


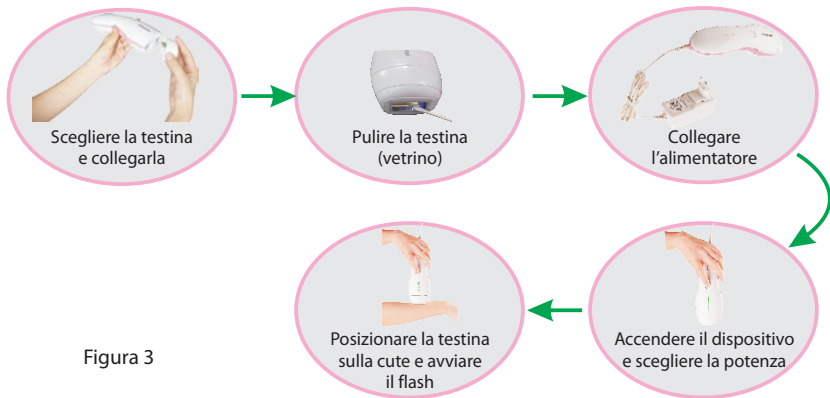


Figura 3


4. Indicatore durata (vita utile) della testina (Figura 4)

Dopo aver avviato il dispositivo, i led verdi sulla barra di potenza (come mostrato in figura 4) lampeggeranno per 3 volte indicando la percentuale di vita rimanente della testina. Ciascun livello di potenza corrisponde al 20% della vita utile della testina.

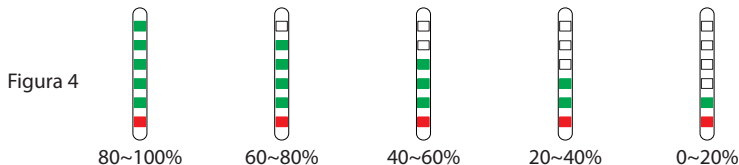

★ Dopo aver avviato il dispositivo se tutti i led relativi alla potenza rimangono accesi significa che è stato raggiunto il 100% della vita utile della testina. Per procedere con il trattamento è necessario sostituire la testina.

5. Premere il tasto centrale per selezionare il livello di potenza desiderato. Il livello 1 corrisponde al livello più basso, il livello 5 corrisponde al livello di potenza più alto (come mostrato in figura 5).

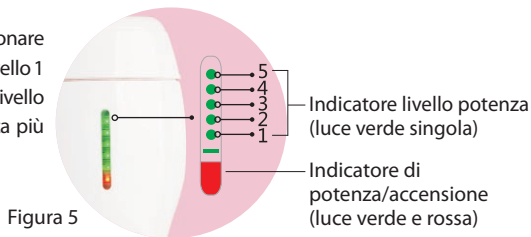

6. Il dispositivo è dotato di un sistema di riconoscimento tra cute e testina: con testina correttamente a contatto con la cute il led relativo alla potenza lampeggerà in verde. In caso di mancato contatto tra testina e cute il led comincerà a lampeggiare in rosso e non sarà possibile eseguire il trattamento.
7. Al termine del trattamento, tenere premuto il tasto centrale per spegnere il dispositivo.

ATTENZIONE: Nel caso non venga eseguita nessuna operazione per un tempo superiore a 5 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.

4. FUNZIONAMENTO

4.1 SKIN TEST PRIMA DELL'UTILIZZO

Prima di iniziare il trattamento si suggerisce di fare riferimento alla tabella riportata a pagina 13. Verificare le possibili reazioni effettuando un test su una piccola area 24 ore prima del trattamento.

Modalità di esecuzione del test

- Se si utilizza il dispositivo per la prima volta, effettuare il test su una piccola area (per esempio del braccio) partendo dal livello di potenza più basso e aumentando gradualmente per verificare la reazione della cute (1-2 flash sulla stessa area).
- Sospendere il trattamento e consultare un medico in caso di gonfiori, ustioni, variazioni sospette del follicolo pilifero, dolore o sintomi anomali.
- Se non compaiono reazioni dopo 24 ore dal primo test masi è avvertita solo una sensazione di forte calore, è consigliabile ridurre di un livello la potenza selezionata.

4.2 TESTINA PER EPILAZIONE PERMANENTE (HR LAMP)

A. Aree di trattamento: viso, ascelle, gambe, braccia, petto/schiena e zona bikini.

Compatibilità	Adatto	Adatto	Adatto	Adatto	Attenzione	Non adatto
Tonalità della pelle	Molto chiara	Chiara	Olivastra	Marrone chiaro	Marrone	Marrone scuro/nera

B. Istruzioni operative (Figura 6)

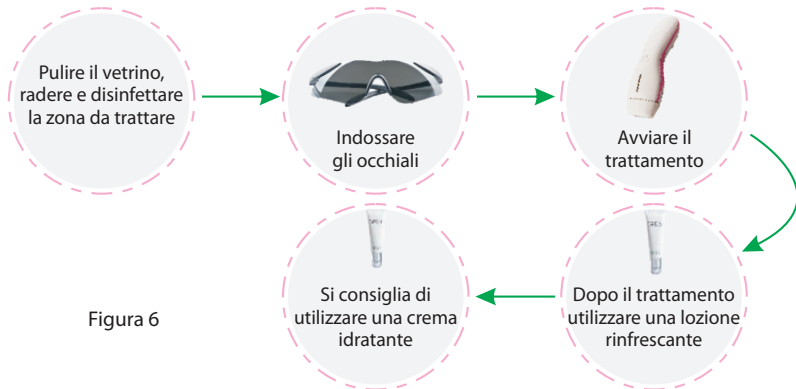


Figura 6

C. Istruzioni d'uso: suddividere idealmente la parte da trattare in sezioni grandi quanto la testina di emissione. Cominciare il trattamento posizionando la testina su ciascuna sezione e procedendo dal basso verso l'alto (o da sinistra verso destra) fino a garantire la copertura completa dell'intera zona trattata. **Emettere un solo impulso luminoso per ogni sezione.**

Ripetere il trattamento dell'intera zona (gamba, braccio, inguine, ecc.) da 2 a 4 volte (come indicato nella tabella sottostante) procedendo sempre per sezioni e prestando attenzione che la testina sia perfettamente a contatto con la cute.

Tipo di pelle / Zona di trattamento	Molto chiara	Chiara	Olivastra	Marrone chiaro	Marrone	Marrone scuro/nera
	I	II	III	IV	V	VI
Ascelle	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-4 3/4 volte	potenza 2-4 2/3 volte	potenza 2-3 2/3 volte	Non adatto
Braccia	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-5 2/3 volte	potenza 2-5 2/3 volte	potenza 1-4 2/3 volte	Non adatto
Gambe	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-5 2/3 volte	potenza 2-5 2/3 volte	potenza 2-4 2/3 volte	Non adatto
Zona bikini	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 2-5 3/4 volte	potenza 3-4 2/3 volte	potenza 1-3 2/3 volte	Non adatto
Viso	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 3-5 3/4 volte	potenza 2-4 3/4 volte	potenza 2-3 2/3 volte	potenza 1-3 2/3 volte	Non adatto

Si raccomanda di iniziare sempre la prima seduta partendo dal livello più basso di potenza. È possibile aumentare gradualmente la potenza nelle sedute successive tenendo in considerazione la reazione della cute durante e dopo il trattamento.

ATTENZIONE: se si avverte un calore eccessivo durante il trattamento interrompere immediatamente la seduta.

ATTENZIONE: il ciclo di crescita dei peli è influenzato da fattori biologici individuali che potrebbero influenzare (ritardare o accelerare) i tempi suggeriti.

D. Numero e frequenza dei trattamenti

- 6-10 trattamenti;
- Per i primi trattamenti (3-5), una seduta ogni 2/3 settimane;
- Nei trattamenti successivi (6-10), eseguire una seduta ogni 4/6 settimane;
- Nel periodo di mantenimento, eseguire una seduta ogni 2-3 mesi specificatamente per l'area in cui è avvenuta una ricrescita del pelo.

4.3 TESTINA PER RINGIOVANIMENTO CUTANEO (SR LAMP)

A. Applicazioni

Invecchiamento della pelle, trattamento delle rughe o impurità (pori), mancanza di elasticità.

B. Istruzioni operative (Figura7)

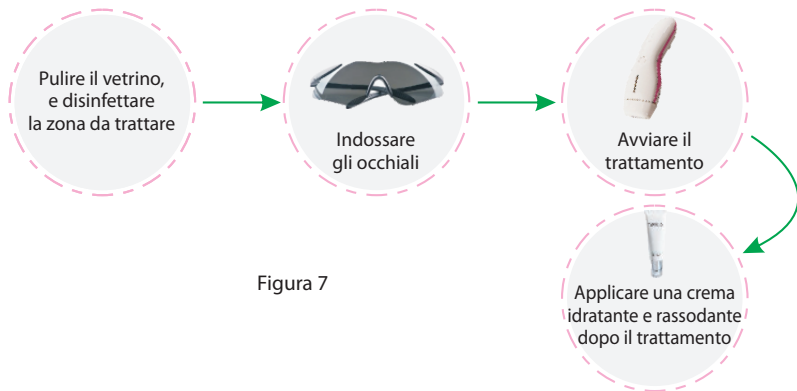


Figura 7

C. Istruzioni d'uso: suddividere idealmente la parte da trattare in sezioni grandi quanto la testina di emissione. Cominciare il trattamento posizionando la testina su ciascuna sezione e procedendo dal basso verso l'alto (o da sinistra verso destra) fino a garantire la copertura completa dell'intera zona trattata. **Emettere un solo impulso luminoso per ogni sezione.**

Ripetere il trattamento dell'intera zona 2-3 volte procedendo sempre per sezioni e prestando attenzione che la testina sia perfettamente a contatto con la cute.

Si raccomanda di iniziare sempre la prima seduta partendo dal livello più basso di potenza. È possibile aumentare gradualmente la potenza nelle sedute successive tenendo in considerazione la reazione della cute durante e dopo il trattamento.

ATTENZIONE: se si avverte un calore eccessivo durante il trattamento interrompere immediatamente la seduta.

D. Numero e frequenza dei trattamenti

- 10 trattamenti;
- 1 trattamento a settimana per ringiovanimento cutaneo, per aumentare l'elasticità della pelle e impurità della cute (pori);
- 1 trattamento ogni 1-2 settimane per mantenimento.

4.4 TESTINA PER TRATTAMENTO ACNE (AC LAMP)

A. Applicazioni

Acne, impetigine, papule.

B. Istruzioni operative (Figura 8)

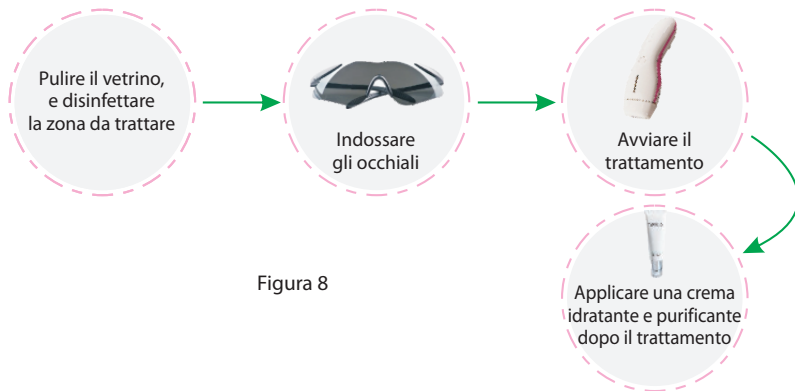


Figura 8

C. Istruzioni d'uso: suddividere idealmente la parte da trattare in sezioni grandi quanto la testina di emissione. Cominciare il trattamento posizionando la testina su ciascuna sezione e procedendo dal basso verso l'alto (o da sinistra verso destra) fino a garantire la copertura completa dell'intera zona trattata. **Emettere un solo impulso luminoso per ogni sezione.**

Ripetere il trattamento dell'intera zona 2-3 volte procedendo sempre per sezioni e prestando attenzione che la testina sia perfettamente a contatto con la cute.

Si raccomanda di iniziare sempre la prima seduta partendo dal livello più basso di potenza. È possibile aumentare gradualmente la potenza nelle sedute successive tenendo in considerazione la reazione della cute durante e dopo il trattamento.

ATTENZIONE: se si avverte un calore eccessivo durante il trattamento interrompere immediatamente la seduta.

D. Numero e frequenza dei trattamenti

ATTENZIONE: eliminare eventuale pus presente nell'area da trattare prima di cominciare il trattamento.

- 1 trattamento ogni 2/3 giorni durante la fase acuta;
- 1 trattamento a settimana per mantenimento.

5. RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Nel caso dovesse manifestarsi qualche problema nel funzionamento, si raccomanda di consultare la seguente guida; se il problema persiste si prega di consultare il fabbricante o il centro di assistenza autorizzato.

Problema	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Inserire correttamente la spina ed il cavo nel connettore dell'apparecchio. Se il problema persiste contattare il fabbricante o il centro di assistenza autorizzato.
La testina non emette	Verificare la temperatura della testina e del dispositivo. Se questa risulta elevata (oltre i 35°C) si attiva un sistema di protezione interno per cui l'emissione si blocca automaticamente. Contattare il fabbricante o il centro di assistenza autorizzato.
	Verificare che la testina sia a perfetto contatto con la cute e controllare nuovamente l'accensione dei led.
Non è possibile regolare la potenza	Se il livello di potenza viene variato ripetutamente è necessario attendere tre minuti prima di cominciare il trattamento.
I led verdi rimangono accesi	Verificare se nell'ambiente ci sono altri dispositivi elettronici che possono interferire con il corretto funzionamento del dispositivo.

6. GARANZIA

L'apparecchio è coperto da garanzia di anni 2 a decorrere dalla data di acquisto sulle parti elettriche ed elettroniche. Non sono coperte dalla garanzia le parti soggette a normale usura d'utilizzo (lampade) e tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione o in caso di manomissione dell'apparecchio ed intervento sullo stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o dal rivenditore autorizzato.

In caso di successivo intervento in garanzia, l'apparecchiatura va imballata in modo da evitare danni durante il trasporto e spedita al costruttore assieme a tutti gli accessori. Per avere diritto agli interventi in garanzia, l'acquirente dovrà inviare l'apparecchio munito della ricevuta o fattura comprovante la corretta provenienza del prodotto e la data di acquisto.

Norme di garanzia.

1. *In caso di intervento in garanzia dovrà essere allegata la ricevuta fiscale o fattura d'acquisto, all'atto della spedizione della merce.*
2. *La durata della garanzia è di anni 2 (due) sulle parti elettroniche. La garanzia viene prestata attraverso il punto vendita di acquisto oppure rivolgendosi direttamente al costruttore.*
3. *La garanzia copre esclusivamente i danni del prodotto che ne determinano un cattivo funzionamento.*
4. *Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, mano d'opera compresa.*
5. *La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria o uso non conformi alle istruzioni fornite, danni provocati da interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente, con particolare riferimento alle parti esterne.*
6. *La garanzia non si applica inoltre a danni causati all'apparecchio da alimentazioni non idonee.*
7. *Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo.*
8. *La garanzia non include i costi di trasporto che saranno a carico dell'acquirente in relazione ai modi ed ai tempi del trasporto.*
9. *Trascorsi i 2 anni la garanzia decade. In tal caso gli interventi di assistenza verranno eseguiti addebitando le parti sostituite, le spese di manodopera e le spese di trasporto secondo le tariffe in vigore.*
10. *Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il foro di Venezia.*

7. SUPPORTO TECNICO

Per maggiori informazioni o supporto tecnico contattare il distributore autorizzato tramite:

- Servizio clienti +39 041 5401356
- E-mail iacer@iacer.it
- Area Contattaci www.itechmedicaldivision.com

8. NOTE



I.A.C.E.R. S.r.l.

Sede operativa:

30030 Martellago (VE) - Via S. Pertini 24/A

Tel +39 041 5401356 - Fax +39 041 5402684

Sede legale:

S. Marco 2757 - 30124 Venezia

iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com